

内窥镜面罩

英特赛克的内窥镜面罩为单个病人一次性使用，减少交叉感染的风险。

在管理镇痛气体的同时，英特赛克的内窥镜面罩允许探测镜头进入患者的鼻子或者口腔。面罩上共有三个单向阀（1号尺寸的面罩只有1个单向阀），这样就易于从患者的任意一侧进入。


这种面罩主要用于支气管镜检查，通过中央22mm接头给予镇痛气体。这种面罩也可用于进行经食道超声心动图（t.o.e）的患者。



带颜色标识的固定环易于辨别，可以与英特赛克气道类的产品配套使用。

自封型的阀门使内窥镜检查更加便利。

柔软的充气囊增强了患者的舒适性，贴合更加紧密。

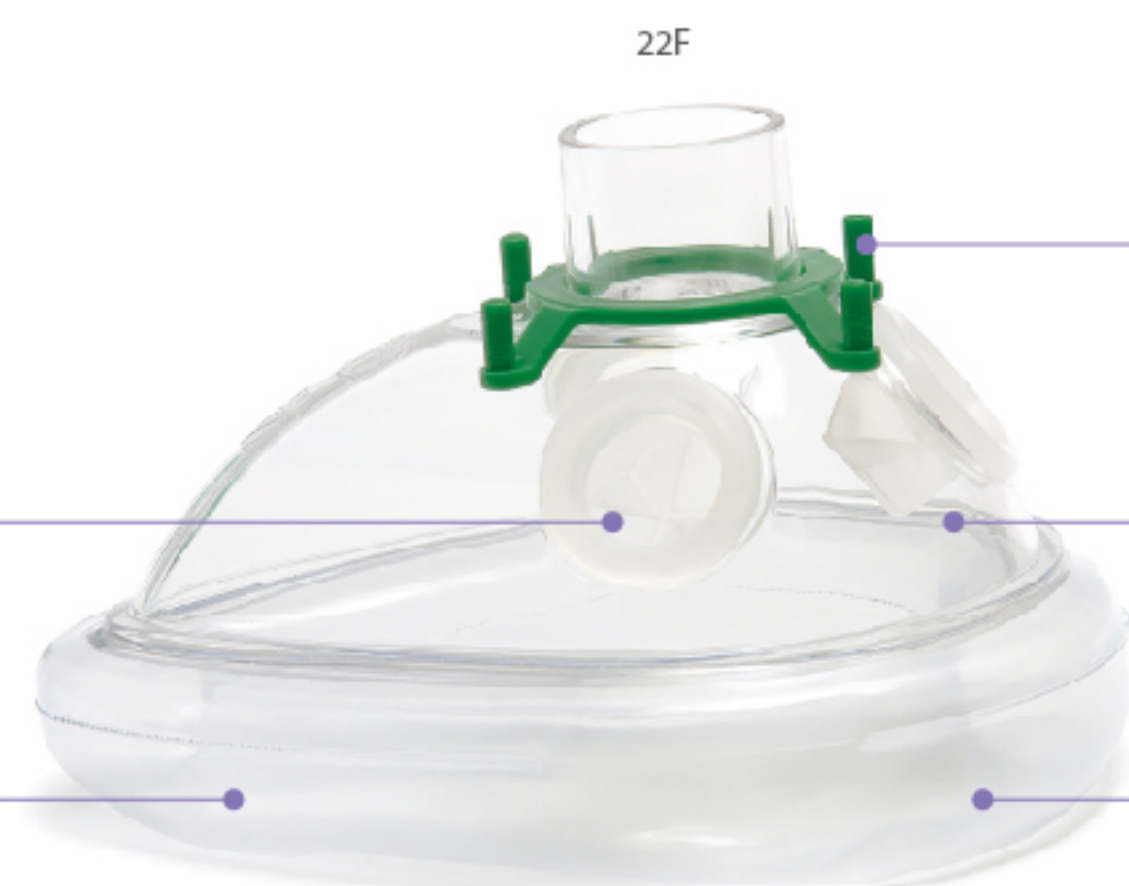

形状符合人体工学，贴合的更加精密。

4种尺寸可选，尺寸范围覆盖新生儿至成人。

产品编号	描述	尺寸	每箱数量
1594000	成人型可下内窥镜面罩	4	40
1593000	成人型（小）可下内窥镜面罩	3	50
1592000	儿童型可下内窥镜面罩	2	35
1591000	新生儿型可下内窥镜面罩	1	40

敬请关注



英特赛克医疗器械（常州）有限公司

地址：江苏省常州市新北区辽河路1011号
 电话：0519-69817000 传真：0519-69817001
 邮箱：sales@i-gel.cn
 网址：www.i-gel.cn www.intersurgical.com.cn

英国总公司

Crane House, Molly Millars Lane,
 Wokingham, Berkshire, United Kingdom
 T: +44 (0) 118 9656 300
 www.intersurgical.com



麻醉面罩



Quality, innovation and choice

优质 创新 选择

QuadraLite™

无囊麻醉面罩

• 透明的壳体
卓越的透视性

• 柔软的密封圈
用于不同的脸型，佩戴更加
舒适，同时保证了气密性



• 符合解剖结构的设计，无需充气
提供精准的贴合和更少的死腔

• 颜色标记
与其他英特赛克产品进行颜
色匹配，更易选择

独一无二的设计

QuadraLite™没有使用带囊的充气垫，创新的成型技术和符合人体面部解剖结构形态的壳体。清澈透明的外壳为患者提供了优越的密封性及舒适度，透明的壳体更便于对病人的监控。

四个尺寸适用范围涵盖了所有脸型

轻量化的面罩使得只需最小力度的按压（特别适用于有过面部整形手术的患者），便能为各种不同形状的脸型带来优越的密封性；只有4种尺寸，取代了传统的7种尺寸，为医护人员带来更加优越简单的选择方案。



更加环保、安全的选择

QuadraLite™是英特赛克环保产品系列中的一种，不含PVC材质，对环境的影响降到了最低。环保系列的面罩都有独特的序列号与每位患者的使用记录相匹配，拥有优越的可追溯性。

产品产编品码编	7194000	7193000	7192000	7191000
每箱数量	35	35	25	30
型号尺寸	5-6	3-4	2-3	0-1
适用人群	成人(特大)	成人(中)	成人(小)	儿童
接头尺寸	22F	22F	22F	15M
颜色标识	■	■	□	■
固定环	✓	✓	✓	
eco	✓	✓	✓	✓




带香味的麻醉面罩

英特赛克提供一种多尺寸带香味的麻醉面罩，香味种类有樱桃，草莓，香草并且都为清凉薄荷型颜色可帮助患者放松情绪。这些带香味的面罩适合单个患者使用来减少交叉感染的风险。



气囊充气阀门在面罩顶部提高了患者的舒适性

柔软的充气囊
增强了患者的舒适性，贴
合更加紧密

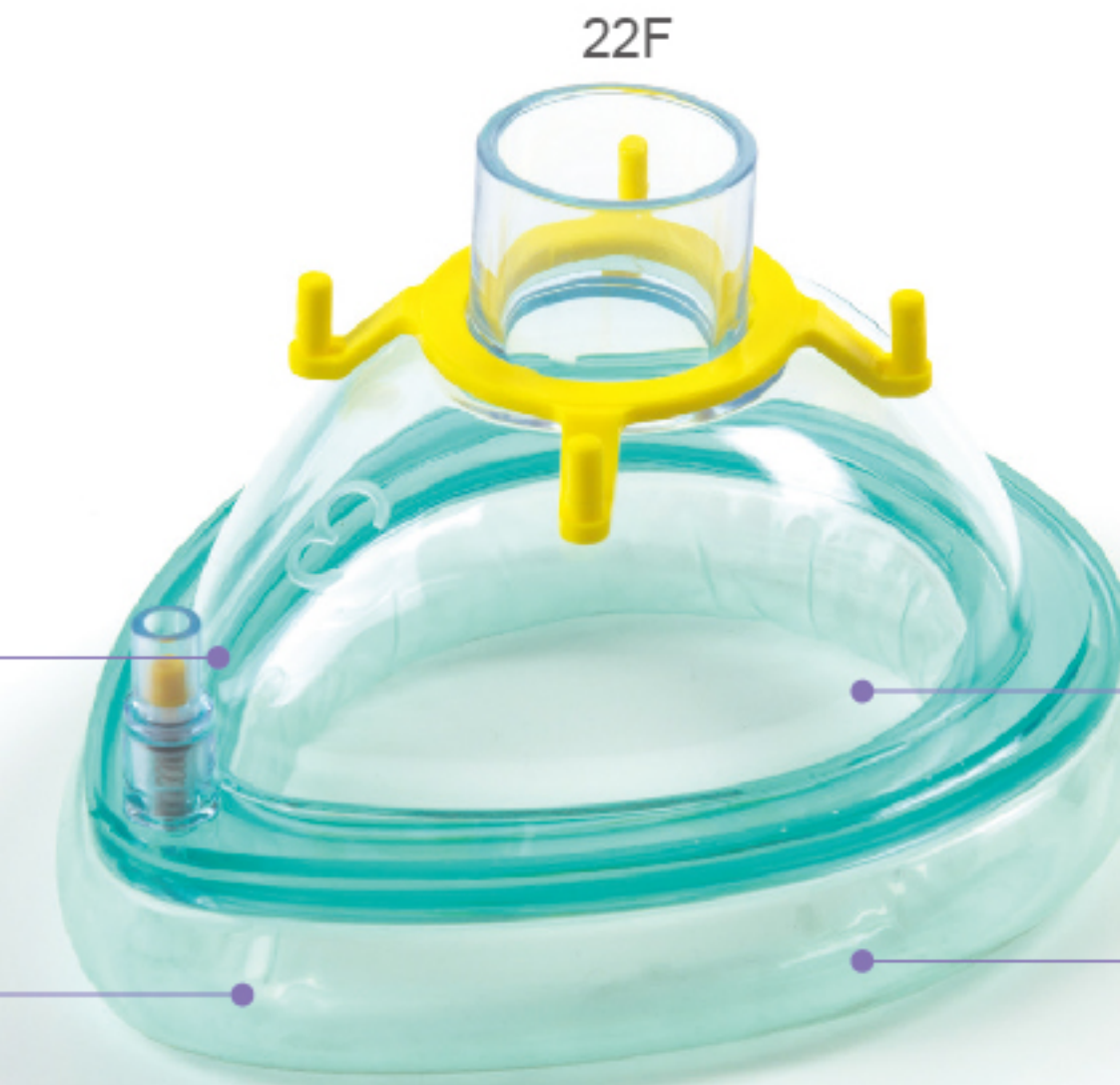

透明柔软的壳体便于对患者
者的监控

带香味
帮助患者放松情绪

产品编号	描述	尺寸	每箱数量
● 1125000	成人(大)型带香味麻醉面罩，橙色固定环，香草味，接头尺寸22F	5	30
● 1124000	成人(中)型带香味麻醉面罩，绿色固定环，香草味，接头尺寸22F	4	40
● 1123000	成人(小)型带香味麻醉面罩，黄色固定环，香草味，接头尺寸22F	3	50
○ 1122000	儿童型带香味麻醉面罩，白色固定环，樱桃味，接头尺寸22F	2	35
○ 1129000	儿童型带香味麻醉面罩，白色固定环，草莓味，接头尺寸22F	2	35
● 1121000	婴儿型带香味麻醉面罩，灰色固定环，樱桃味，接头尺寸15M	1	32
● 1128000	婴儿型带香味麻醉面罩，灰色固定环，草莓味，接头尺寸15M	1	32
● 1120000	新生儿型带香味麻醉面罩，蓝色固定环，樱桃味，接头尺寸15M	0	40
● 1127000	新生儿型带香味麻醉面罩，蓝色固定环，草莓味，接头尺寸15M	0	40