

附件

为了完善口腔护理系列产品，Intersurgical开发了一系列实用的附件和清洁工具。在忙碌的ICU中，这些附件可以帮助提高口腔护理的效率。



OroCare™ 负压吸引扩展接头
OroCare负压吸引扩展接头设计为在一个负压吸引装置上接两根吸引管路时使用。当密闭式吸痰管已经连接到负压源时可能需要用到这个扩展接头。



OroCath 口咽吸痰管
高度柔韧的口咽吸痰管可以吸除多余的分泌物。它可以连接到任何标准吸引管的漏斗型接头。



OroFill 漱口水
装有漱口水的小瓶是为单手操作的口腔护理程序准备的。只要把小瓶直接放入OroCare2护理刷的手柄中就可以使用。



OroFill 无菌水
预装的OroFill无菌水可以与OroCare Select护理刷结合使用。内含无菌水，是给六岁以下的儿童进行口腔护理唯一推荐的液体。它也可以用于使用牙膏以后的口腔冲洗。一包包含10小支。



OroClean 洁牙凝胶
OroClean洁牙凝胶是单剂量小袋包装的。这是为了减少因重复使用标准的洁牙凝胶管而造成交叉感染的风险。

型号	产品描述	每箱数量
3018000	OroCath 口咽吸痰管	80
3010000	OroFill 漱口水（与Orocare2匹配使用）,15ml	100
3013000	OroFill 无菌水（与Orocare Select匹配使用）,14ml-每包10支	34
3021000	OroClean 洁牙凝胶,2g	250
3022000 <i>NEW</i>	OroCare™ 负压吸引扩展接头	25

151.22 • Issue 3 04.14

敬请关注



新浪微博
weibo.com/intersurgical



腾讯微信



英特赛克医疗器械（常州）有限公司

地址：江苏省常州市新北区辽河路1011号
电话：0519-69817000 传真：0519-69817001
邮箱：sales@i-gel.cn
网址：www.i-gel.cn www.intersurgical.com.cn


英国总公司

Crane House, Molly Millars Lane,
Wokingham, Berkshire, United Kingdom
T: +44 (0) 118 9656 300
www.intersurgical.com



OroCare™

完整的ICU口腔护理解决方案

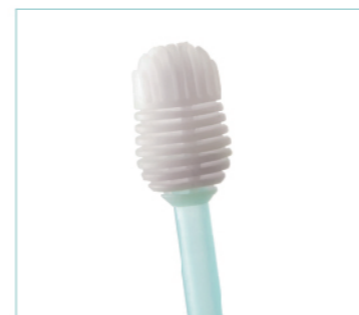

专门针对呼吸机相关性肺炎



优质 创新 选择

Quality, innovation and choice

通过口腔护理来减少呼吸机相关性肺炎的发生


呼吸机相关性肺炎 (VAP)可能会导致延长气管插管留置和住在ICU的时间,并增加相关费用。它也是导致患者死亡的常见原因。

一个适当的口腔护理方案(刷牙、吸痰)能有效地预防口咽部细菌生物膜的滋生。同时也能降低VAP和吸入性肺炎的发生,并大大降低相关的治疗费用。

VAP Fact 1: VAP在ICU所有病人中的发生率为9-25%。

VAP Fact 2: 每发生一起VAP将增加医院\$30,000-\$40,000的支出。


VAP Fact 3: VAP的死亡率大约在10-40%。

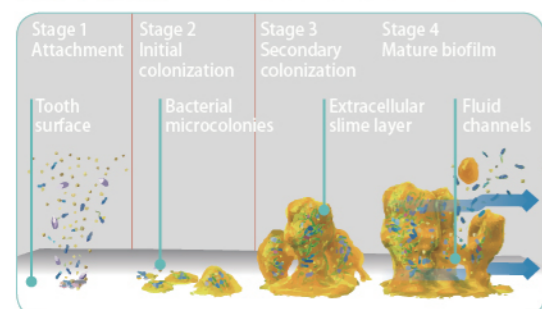

牙菌斑是一种由细菌及其排泄物形成的生物膜,主要分布在牙龈之间,使用纱布或海绵无法清除这些细菌。




口腔中的细菌会在每次清洁后的两小时内迅速形成细菌生物膜并覆盖在牙齿表面。这层生物膜会保护如金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌等在ICU中常见的致病菌。这层生物膜必须在使用抗菌剂前被破坏掉。

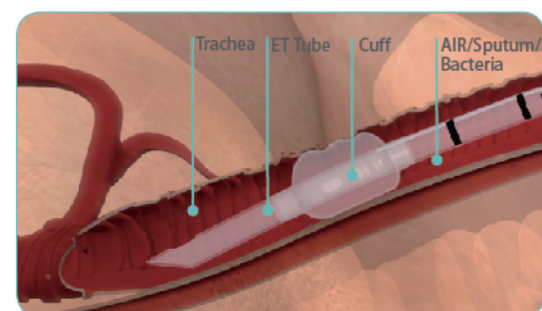

如果不能去除菌斑和细菌,它们会向下移动到气管导管的气囊部。由于气囊密封性不能达到100%,所以就会导致吸入性肺炎的发生,甚至可能引发呼吸机相关性肺炎。作为口腔护理方案的一部分,定期吸引气囊上端是很重要的,这样能防止细菌进入肺部。

使用评估指南

由于病人的口咽条件有很大不同,在住院期间可能会迅速改变,所以需要进行每天例行性的口腔状况评估。我们创建了一种评估指南可供下载,用来协助你启动口腔评估的程序。

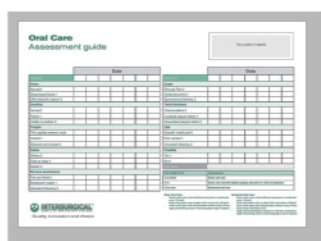


视频

你可以观看视频来学习 Intersurgical 口腔护理系列产品的使用方法。




口腔护理工具


带有软毛的牙刷是清除牙菌斑最有效的工具。传统牙刷使用过程中容易掉毛,而我们 Intersurgical 专门为ICU的病人提供了一整套一体成型的带有软毛的医用牙刷以及其他清洁工具,成人与儿童都能适用。这些工具头部比较小,对患者无任何伤害,可以让操作者轻柔高效地清洁病人口腔中的每一个部位。



OroCare™ Mini 型护理刷
对于咽喉状况比较差的患者,是一个理想的解决方案。它具有细而长的颈部,可以使牙刷更容易到达口腔中的每一个部位。




OroCare™ Aspire 抽吸式护理刷
内置一体式吸引连接管,可与吸引管连接直接用来吸引,不需要额外配杨克氏(Yankauer)吸引头。细长的颈部使得牙刷更容易到达口腔中的每一个部位,并且不会干扰到气管导管和其他器械。




OroCare™ Select 改进型多功能护理刷(带漱口水瓶)
可以连接标准的吸引管,并且可以通过刷柄上的指控口来控制负压吸引。手柄内附一个空的漱口水瓶,操作者能自由加入所需要的抗菌溶液。



OroCare™ 2 多功能护理刷
护理刷的手柄内可以放置装有合适溶液的漱口水瓶。操作者可以一边轻轻挤压手柄释放漱口水一边用非创伤性的刷毛为病人仔细刷牙。手柄末端可以连接至标准吸引管。操作者可以通过覆盖刷柄上的指控口来控制负压吸引。




OroCare™ 24小时口腔护理套装
我们提供预包装的24小时口腔护理套装。根据你所选择的套装,可以进行每四小时或八小时的口腔护理。包装中附有一个多功能挂钩可以将套装挂在病人床轨或者床头墙壁上,方便操作者取用。



OroCare™ 针对敏感型牙龈
这是一款独特的口腔护理棒,适用于有着脆弱牙龈和组织的患者。一体式的柔软刷头提供了替代传统棉球擦拭法的完美解决方案。这款口腔护理棒可以用来温和地清洁牙齿和软腭。

产品代码	产品描述	每箱数量
3011000	OroCare™ Mini 迷你型护理刷	30
3017000 NEW	OroCare™ Sensitive 口腔护理棒(针对敏感型牙龈)	15
3012000	OroCare™ Select 改进型多功能护理刷(带漱口水瓶)	50
3016000 NEW	OroCare™ Aspire 抽吸式护理刷	25
3008000	OroCare™ 2 多功能护理刷	50
3008001	OroCare™ 2 多功能护理刷(带漱口水瓶)	50
3014000 NEW	OroCare™ 24小时口腔护理套装—q4(每四小时一次)	10
3015000 NEW	OroCare™ 24小时口腔护理套装—q8(每八小时一次)	15

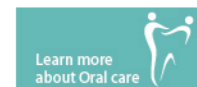

www.intersurgical.com /info/oralcare

References
1. R. GARCIA, L. JENDRESKY, L. COLBERT, A. BAILEY, M. ZAMAN et M. MAJUMDER, Reducing Ventilator-Associated Pneumonia Through Advanced Oral-Dental Care: A 48-Month Study, AJCC, July 2009.
2. J. Rello, D. Ollendorf, G. Oster, M. Vera-Lionch, L. Bellm, R. Redman, M. Kollef: Epidemiology and outcomes of ventilator-associated pneumonia in a large US database, Chest, December 2002.
3. L. Frampton: Preventing HCAI on the intensive care unit, The Clinical Services Journal, March 2014.